

Più della metà (58%) dei pazienti afferma che la medicazione è rigida o non si adatta ai movimenti del corpo⁷.


Progettata per essere conformabile e rimanere in posizione

Grazie alla tecnologia Flex, la conformabilità unica di Mepilex® Border Flex gli permette di adattarsi alla forma e ai movimenti del paziente². Alleviando la pressione sulla cute e non tirando sui bordi, si aumenta il comfort e si riduce al minimo il rischio che si stacchi⁹. Inoltre, è resistente all'acqua, consentendo ai pazienti di farsi la doccia⁹.



Straordinaria tecnologia Flex = 360° flessibilità

Gli Y-cuts si allargano per consentire il movimento:

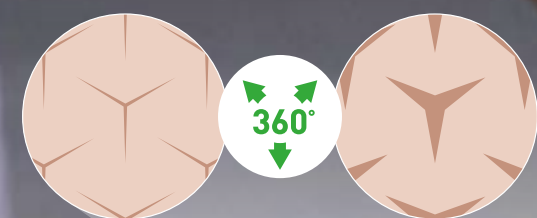

Mepilex Border Flex

è

FINO A 11x

più flessibile rispetto ad altre medicazioni in schiuma bordate testate².

Mepilex® Border Flex può influire positivamente sul budget

Mepilex Border Flex può avere un impatto positivo sul budget. Eseguiti in condizioni reali, due QIP individuali in un ambiente ospedaliero degli Stati Uniti hanno mostrato sostanziali riduzioni nell'utilizzo delle medicazioni rispetto alle loro precedenti medicazioni formulate*, pur mantenendo lo stesso percorso di guarigione delle ferite valutate. Un cambiamento nel protocollo dovuto al tempo di utilizzo prolungato di Mepilex Border Flex ha quindi comportato un minor numero di cambi di medicazione, una documentata riduzione dei costi e un minor tempo di degenza^{16,17}.

*altre medicazioni presenti sul mercato.

Visita www.molnlycke.it per scoprire come le medicazioni Mepilex® Border Flex possono aiutare i pazienti, il personale sanitario e la gestione del budget.



Mepilex Border Flex

Codice	Misura (cm)	Pezzi dispenser	Pezzi TRP
595200	7.5 x 7.5	5	50
595300	10 x 10	5	50
595000	12.5 x 12.5	5	50
595400	15 x 15	5	50
595600	15 x 20	5	50

Nota:
Si prega di contattare il rappresentante Mölnlycke locale per informazioni sui numeri d'ordine disponibili nel proprio paese.



Mepilex Border Flex Oval

Codice	Misura (cm)	Pezzi dispenser	Pezzi TRP
583500	7.8 x 10	5	50
583300	13 x 16	5	35
583400	15 x 19	5	45



Mepilex Border Flex Lite

Codice	Misura (cm)	Pezzi dispenser	Pezzi TRP
581011	4 x 5	10	70
581100	5 x 12.5	5	65
581200	7.5 x 7.5	5	70
581300	10 x 10	5	50
581500	15 x 15	5	50

References: 1. Mölnlycke Health Care. Mepilex® Border Flex – Estimate of spreading area using dot pattern on backing film. Report no. PD-528872. Data on file. 2. Mölnlycke Health Care. Mepilex® Border Flex Product Manual – Conformability PD-528870. Data on file. 3. Mölnlycke Health Care. Mepilex® Border Flex-Bacteria encapsulation. Report no. PD-537072. Data on file. 4. Mölnlycke Health Care. Mepilex® Border Flex Product Manual – Spreading layer PD-528874. Data on file. 5. Mölnlycke Health Care. Product Manual – Maintained dressing profile. Report no. 525458. Data on file. 6. White, R. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK 2008;4(1):14-22. 7. Opinion Matters' Professional Health Care Treatment for Wounds' survey conducted June–July 2018 in UK. Data on file. 8. Mölnlycke Health Care. Mepilex® Border Flex – External data – FEM simulations MxB Flex vs Allewyn Lite. Report no. PD-529747. Data on file. 9. Mölnlycke Health Care. Mepilex® Border Flex – Waterproofness. Report no. PD-532095. Data on file. 10. Mölnlycke Health Care. Mepilex® Border Flex – Fluid handling capacity compared to Urgotul Foam Absorb Border, Aquacel Foam, Allewyn Classic Gentle Border, Allewyn Life, Optifoam Gentle, KerFoam Gentle Border. Report no. PD-527642. Data on file. 11. Mölnlycke Health Care. Mepilex® Border Flex – Absorption and dispersion tests on inclined plane, viscous test solution. Report no. PD-528871. Data on file. 12. Mölnlycke Health Care. Product manual Initial abs different test solutions. Report no. PD-535352. Data on file. 13. Mölnlycke Health Care. Product Manual Mepilex® Border Flex – Viral penetration. Report no. PD-535090. Data on file. 14. Woo, K., Coult, P.M., Price, P., Harding, K., Sibbald, R.G. A randomised crossover investigation of pain at dressing change comparing foam dressings Advances in Skin and Wound Care 2009;22(7):304-310. 15. Meaume S, et al. A study to compare a new self-adherent soft silicone dressing with a self-adherent polymer dressing in stage I pressure ulcers. Ostomy Wound Management, 2003. 16. Nelson, D. A New Bordered Foam Dressing Technology Improves Wound Outcomes and Satisfaction While Reducing Dressing Utilization in Acute Care. Poster Presentation at WOCN Annual Meeting, Nashville, 2019. 17. Tyson, L. Study First: Driving the Case for Improving Hospital Wound Care. Poster Presentation at WOCN Annual Meeting, Nashville, 2019.

Per saperne di più visita il sito www.molnlycke.it

Mölnlycke Health Care SRL, Via Marsala 40/C, Gallarate, 21013 (Va), Italia. Telefono + 39 0331 714011. I marchi e i loghi Mölnlycke, Mepilex and Safetac sono registrati globalmente a unao più aziende del gruppo Mölnlycke Health Care. ©2021 Mölnlycke Health Care AB. Tutti i diritti riservati.

Rimane in posizione

Si conforma in modo unico



Mepilex® Border Flex
Mepilex® Border Flex Lite

Mölnlycke®

Le ferite hanno bisogno di rimarginarsi. I pazienti hanno bisogno di cure mediche. Gli infermieri hanno bisogno di tempo. Il budget è limitato. La sfida è trovare una medicazione che offra comfort e stabilità per tutto il tempo necessario.

Presentazione della gamma Mepilex® Border Flex

Le nostre medicazioni flessibili di nuova generazione sono progettate in modo tale da rimanere in posizione e conformarsi in modo unico con l'obiettivo di restituire tempo agli infermieri, far risparmiare i manager sui costi e restituire la qualità della vita ai pazienti.




*Non disponibile in Mepilex Border Flex Lite

Scegliere la giusta medicazione per i bisogni del paziente

Progettato per un'ampia gamma di ferite essudanti, tra cui: ulcere agli arti inferiori, ferite traumatiche (ad es. skin tears) e ferite chirurgiche, nonché per far parte di una terapia profilattica per aiutare a prevenire danni alla cute, ad es. ulcere da decubito.

Mepilex® Border Flex Lite

Mepilex Border Flex Lite, una medicazione a quattro strati con tecnologia Flex per ferite da non a moderatamente essudanti, disponibile anche in misure più piccole.

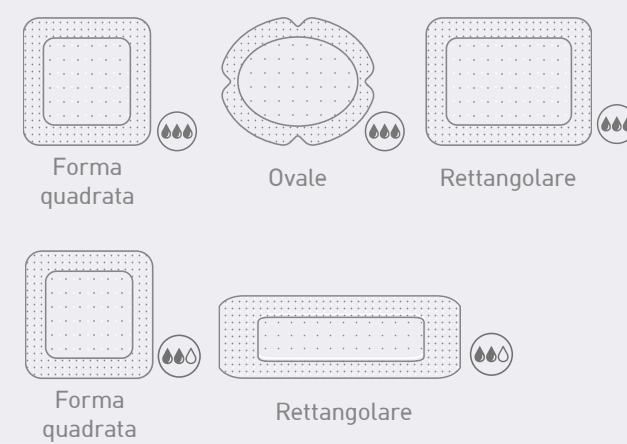

Fino a 1/3 dei pazienti si lamenta della necessità di cambiare la medicazione ogni giorno⁷.

Gestione intelligente dell'essudato

Dà la sicurezza di lasciare la medicazione più a lungo e mantenere comunque un ambiente ottimale per la guarigione delle ferite.



1. Rapido assorbimento con rigonfiamento minimo: Lo strato di schiuma consente un rapido assorbimento dell'essudato normale e viscoso^{11,12} e risulta migliore nella gestione dell'essudato rispetto ad altre medicazioni in schiuma bordate¹⁰.



2. Massimizza la capacità, incanalando l'essudato: L'essudato viene incanalato lontano dalla ferita e diffuso su un'area più ampia^{4,5}.



3. Trattiene i batteri lontano dalla ferita: Le fibre superassorbenti dello strato di ritenzione impediscono all'essudato batterico di accedere nuovamente al letto della ferita, anche sotto compressione^{5*}. La pellicola protettiva impedisce l'accesso ai batteri esterni^{3**}.



4. Si monitora l'essudato senza rimuovere la medicazione: Il sistema di monitoraggio dell'essudato consente di valutare e registrare obiettivamente la diffusione dell'essudato, senza disturbare la ferita¹.

*Non disponibile in Mepilex Border Flex Lite

**particelle/ microbi di dimensioni superiori a 25 micrometri

Come funziona il sistema di monitoraggio dell'essudato

Evitando di disturbare la ferita si favorisce la guarigione. Il sistema di monitoraggio dell'essudato, è possibile lasciare la medicazione in posizione con tranquillità per un maggior periodo di tempo¹.



Il sistema di monitoraggio dell'essudato è costituito da una griglia di puntini equidistanti.



ad. es. 4 x 4cm

E' possibile effettuare un conteggio dei punti che riflette il volume dell'essudato nella medicazione.



ad. es. 8 x 10cm

E' quindi possibile fare riferimento al conteggio dei punti registrato per monitorare la tendenza dell'essudato.



ad. es. 10 x 14cm

Considerare il cambio della medicazione quando l'essudato si raggiunge i bordi della medicazione.^{***}

*** Le frequenze dell'ispezione della ferita e del cambio della medicazione sono determinate dalla decisione clinica e dovrebbero essere a discrezione del medico curante

MEPILEX BORDER FLEX GESTISCE

2.2x

in modo migliore l'essudato rispetto ad altre medicazioni in schiuma bordate testate¹⁰

9 pazienti su 10 sentono che la ferita incide sulla loro qualità della vita⁷.

Riduzione del dolore e dei danni cutanei

Oltre

9/10

dei pazienti preferiscono le medicazioni con Safetac® rispetto ad altre medicazioni con adesivi tradizionali⁶

Tutte le medicazioni Mepilex® Border Flex cercano di ridurre i traumi causati dai cambi di medicazione. Ciò è reso possibile dal nostro comprovato Safetac® morbido strato di contatto con la ferita in silicone, che riduce al minimo il dolore e i danni alla cute e rischio di macerazione rispetto al tradizionale medicazioni (adesive).^{6,14,15}.

